


HOSPITAL CARE

Surflo™

Perfusionsbesteck
Produktinformationen

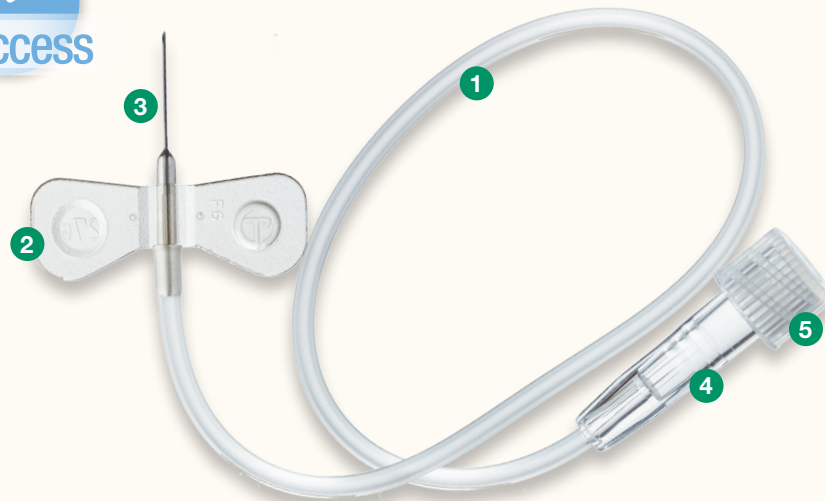

Anwenderfreundlich

Die Flügel des Surflo™ Perfusionsbesteckes sind so konzipiert, dass sie Stabilität und Halt während der Venenpunktion gewährleisten. Durch die leicht angewinkelten Flügel ($< 3^\circ$ zur Kanüle) wird während der Punktion weniger Druck auf das Blutgefäß ausgeübt.

Beschreibung	Verwendete Materialien
1 Schlauch	Polyvinylchlorid
2 Flügel	Polyvinylchlorid + farbiges Masterbatch
3 Kanüle	Edelstahl
4 Adapter	PMMA
5 Adapterkappe	Polypropylen
Protektor	Polyethylen

Enthält keine Bestandteile aus DEHP oder Naturkautschuklatex.



Sterilisation

Mit Ethylenoxid für einen Sterilitäts-Sicherheitsfaktor (SAL) von mindestens 10^{-6}



Lagerung

- Haltbarkeit von 5 Jahren („NL“-Artikel) oder 3 Jahren („BLSA“- & „EL“-Artikel)
- Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf der Einzelpackung aufgedruckt („NL“-Artikel) oder in die Folie der Einzelpackung eingepreßt („BLSA“- & „EL“-Artikel)
- Lagern Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

The comfort of your patients is in your hands

Produktsortiment

Artikelnummer	Farbe	Außen-Ø der Kanüle		Kanülenlänge	Totraumvolumen	Schlauchlänge	Ersatz für
SV*18NL30	Rosa 	18G	1,20 mm	19 mm	0,45 ml	300 mm	SV*18BLK03
SV*19NL30	Elfenbein 	19G	1,10 mm	19 mm	0,45 ml	300 mm	-
SV*21NL30	Grün 	21G	0,80 mm	19 mm	0,41 ml	300 mm	SV*21BLK03
SV*22NL30	Schwarz 	22G	0,70 mm	19 mm	0,41 ml	300 mm	SV*22BLK03
SV*23NL30	Blau 	23G	0,60 mm	19 mm	0,40 ml	300 mm	-
SV*25NL30	Orange 	25G	0,50 mm	19 mm	0,40 ml	300 mm	-
SV*25BLSA02	Orange 	25G	0,50 mm	9,5 mm	0,18 ml	90 mm	-
SV*27EL	Grau 	27G	0,40 mm	13 mm	0,29 ml	200 mm	-

CE 0123 CE 0197  STERILE EO

Verpackung

Verpackungseinheit	Versandkarton		
	Menge	Bruttogewicht	Abmessungen (L x B x H)
50	500	3,2 kg	510 x 257 x 260 mm
50	500	3,1 kg	512 x 262 x 264 mm
50	500	3,2 kg	510 x 257 x 260 mm
50	500	3,2 kg	510 x 257 x 260 mm
50	500	3,1 kg	512 x 262 x 264 mm
50	500	3,0 kg	512 x 262 x 264 mm
100	500	2,7 kg	255 x 472 x 230 mm
100	1000	5,4 kg	475 x 259 x 467 mm

Einzelverpackung: Blisterpackung (thermogeformte Blisterfolie und Papier)

Vorsichtsmassnahmen

- Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
- Produkt nicht wiederverwenden.
- Nach einmaligem Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.

Vor dem eigentlichen Gebrauch die Produktinformation lesen, um sich eine vollständige Übersicht über die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Vorsichtsmaßnahmen zu verschaffen.

Regulierungsstatus

CE-Zertifizierung – Medizinprodukt der Klasse IIa

Für NL-Codes:

Benannte Stelle TÜV SÜD 0123
Hersteller TERUMO MEDICAL PRODUCTS HANGZHOU, M4-9-5, Economic & Technological Development Zone, Hangzhou, 310018 China
EU-Vertreter TERUMO EUROPE N.V.
 Interleuvenlaan 40, 3001 Löwen, Belgien

Für EL/BLSA-Codes:

Benannte Stelle TÜV Rheinland 0197
Hersteller TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Toyko 151-0072, Japan
EU-Vertreter TERUMO EUROPE N.V.
 Interleuvenlaan 40, 3001 Löwen, Belgien

Umfassende Größenauswahl von 18G bis 27G

Der Außendurchmesser der Kanüle ist an dem ISO-farbcodierten Flügel erkennbar.

Ihr Terumo-Partner



TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
 +81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Alle Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von TERUMO CORPORATION, ihrer Tochtergesellschaften oder unabhängiger Dritter. Veröffentlicht von Terumo Europe N.V.